

## GEWICHTE, ABMESSUNGEN, ZUBEHÖR

### Gewichte

Antriebseinheit	17,4 kg
Griffeinheit	4,9 kg
Akku-Pack	2,7 kg
scalaport X7	11 kg
Gesamtgewicht	36 kg

### Abmessungen

Höhe (Griffe eingefahren)	115 cm
Breite Griffe (verstellbar)	43 bis 52 cm
Breite scalaport (verstellbar)	55 bis 73 cm
Tiefe	55 cm

### Treppe

max. Stufenhöhe	20 cm
min. Stufentiefe	11 cm

### Max. Personengewicht

120 kg

### Zubehör

Ladegerät	inkl.
Kopfstütze	inkl.
zusätzlicher Akku-Pack	optional
Beckengurt	optional

## ZUVERLÄSSIGER SERVICE – 48-STUNDEN-MOBILITÄTS- GARANTIE!

Die Versorgung mit einem Alber Produkt schließt automatisch unseren Mobilitäts-Service mit ein. Im Falle eines Funktionsausfalls ist Alber stets an Ihrer Seite. Unser einzigartiger 48-Stunden-Mobilitäts-Service sorgt dafür, dass Sie innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind. Der modulare Aufbau unserer Produkte macht diese besondere Dienstleistung möglich.

Des Weiteren stehen Ihnen unter unserer **kostenlosen Servicenummer 0800/1224567** kompetente Alber Spezialisten mit Rat und Tat zur Seite.



Mit freundlicher Empfehlung:

**Ulrich Alber GmbH**  
Vor dem Weißen Stein 21  
72461 Albstadt  
Telefon 07432 2006-0  
Telefax 07432 2006-299  
info@alber.de

[www.alber.de](http://www.alber.de)

35.0016-6.01.02 © Ulrich Alber GmbH, Albstadt

alber®

Einfach mobil.

# scalamobil® mit scalaport® X7

Mobile Treppensteighilfe



Einfach sicher  
Treppensteigen.

## SCHNELL UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Das scalamobil in Kombination mit dem neuen Universaladapter scalaport X7 ist ein mobiles Treppensteigsystem, mit dessen Hilfe alle handelsüblichen Rollstühle über Treppen jeglicher Art transportiert werden können. Das System ist bestens für den gewerblichen Rollstuhl- und Krankentransport sowie für den Zugang zu öffentlichen Gebäuden geeignet. Auch Rollstühle, für die Alber keine spezielle Halterung anbietet, können alternativ mit dem scalaport X7 transportiert werden.


- Kompatibel mit allen handelsüblichen, manuellen Rollstühlen wie z. B. Pflegerollstühle, Aktivrollstühle, schmale Kinderrollstühle etc.\*
- Andocken an das scalamobil, mit wenigen Handgriffen, ohne spezielle Halterung oder Vorbereitung. Jeder manuelle Rollstuhl ist in Sekundenschnelle transportbereit.
- Tausendfach bewährter und patentierter Steigmechanismus.
- Einfach und sicher zu bedienen, von nur einer Person, mit minimalem Kraftaufwand.
- Schafft enge und gewendelten Treppen jeden Materials.
- Schont den Treppenbelag zuverlässig.
- Bis zu 300 Stufen Reichweite mit einer Akku-Ladung (Wechsel-Akku optional).

\* Einschränkungen durch Kippstützen möglich. Bitte Abmessungen auf Seite 3 beachten.



## ÜBERSICHT ROLLSTUHLABMESSUNGEN

Abmessungen	Minimum	Maximum
1 Spurbreite Rollstuhlräder	39 cm Innen gemessen	73 cm Außen gemessen
2 Sitzhöhe Rollstuhl hinten	35 cm vom Boden	-
3 Höhe Rollstuhlrahmen	14 cm vom Boden	-
4 Breite Rückenlehne	35 cm*	55 cm*
	*mit Adapter 25 cm	*mit Adapter 40 cm

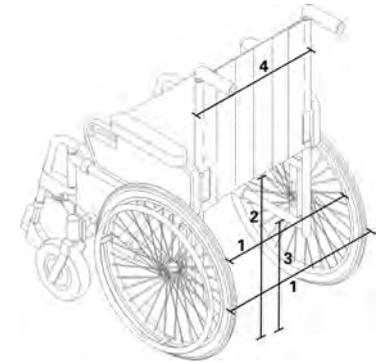

Zertifiziert nach aktuellsten Standards:  
ISO 9001:2000 und ISO 13485:2003 für  
Medizinprodukte



kleines Bild links oben:  
Rollstuhl mit Rädern einfach auf das  
scalamobil ziehen

kleines Bild links unten:  
Einfache Klemmung an der Rücken-  
lehne des Rollstuhls

Bild rechts:  
Platzsparend im PKW zu verstauen  
dank neuartigem Faltmechanismus

